


DUPIXENT® RICHTIG ANWENDEN


Anwendungskarte zur richtigen Anwendung
des DUPIXENT®-Fertigpens

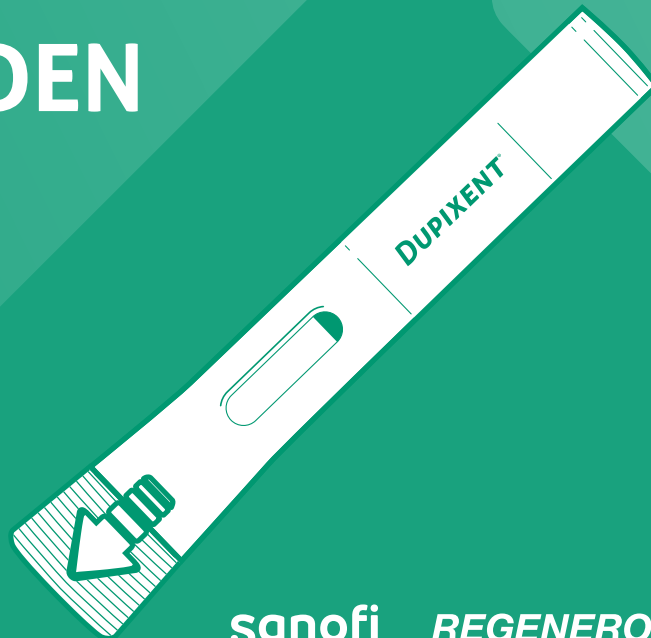

sanofi *REGENERON*


DUPIXENT®-Fertigpen richtig anwenden

Führen Sie die DUPIXENT®-Injektion nur selbst durch, wenn Sie vorher durch Ihr Behandlungsteam entsprechend unterwiesen worden sind. Ihr Arzt* wird mit Ihnen gemeinsam entscheiden, ob und wann Sie die DUPIXENT®-Injektion selbst durchführen können.

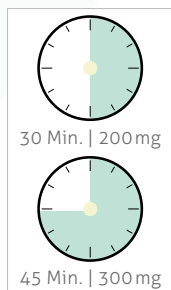

1. Warten Sie, bis der Fertigpen Raumtemperatur angenommen hat.

Lassen Sie den Fertigpen nach der Entnahme aus dem Kühlschrank auf einer ebenen Oberfläche liegen, bis er Raumtemperatur angenommen hat. Die Wartezeit hängt von Ihrer verordneten Dosis ab. Warten Sie mindestens 30 Minuten bei einer Dosis von 200 mg und mindestens 45 Minuten bei einer Dosis von 300 mg.

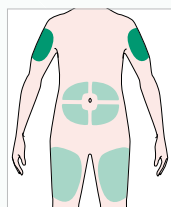


2. Auswahl der Injektionsstelle

- Bei Selbstinjektion: Oberschenkel, Bauch (Unterbauch) außerhalb eines Umkreises von 5 cm um Ihren Bauchnabel herum
- Injektion nur durch eine Pflegeperson: Injektion auch in die Außenseite des Oberarms möglich


Wechseln Sie die Injektionsstelle bei jeder Injektion. **Injizieren Sie nicht** in empfindliche, verletzte oder vernarbte Hautstellen oder in Hautstellen mit blauen Flecken.

Stechen Sie nicht durch Ihre Kleidung hindurch.

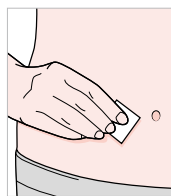


3. Waschen Sie Ihre Hände und desinfizieren Sie die Haut an der Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer.

Lassen Sie die Haut an der Injektionsstelle trocknen, bevor Sie injizieren. Berühren Sie die Injektionsstelle vor der Injektion **nicht** mehr und pusten Sie **nicht** darauf.

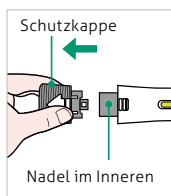

4. Ziehen Sie die Schutzkappe gerade ab.


Entfernen Sie die Schutzkappe erst kurz vor der Injektion. Injizieren Sie DUPIXENT® direkt, nachdem Sie die Schutzkappe abgezogen haben.

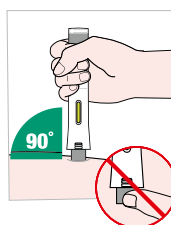

5. Platzieren Sie die Nadelabdeckung etwa im 90°-Winkel auf Ihrer Haut.

Halten Sie den Fertigpen beim Platzieren der Nadelabdeckung auf Ihrer Haut so, dass Sie das Sichtfenster sehen können.


Drücken oder berühren Sie nicht die Nadelabdeckung mit den Fingern.

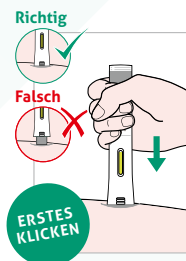

6. Drücken Sie den Fertigpen fest gegen Ihre Haut, bis Sie die Nadelabdeckung nicht mehr sehen können, und halten Sie diese Position.

Zu Beginn der Injektion ist ein Klicken zu hören. Das Sichtfenster färbt sich gelb.


Hinweis: Die Injektion kann bis zu 15 Sekunden dauern.

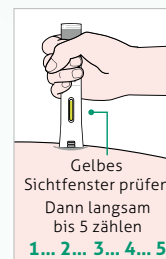

7. Halten Sie den Fertigpen weiter fest gegen Ihre Haut gedrückt.

Möglicherweise hören Sie ein zweites Klicken. Überprüfen Sie, ob sich das gesamte Sichtfenster gelb gefärbt hat. Zählen Sie dann langsam bis fünf.

Sollte sich das Sichtfenster nicht vollständig gelb färben, entfernen Sie den Fertigpen und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Verabreichen Sie sich **keine zweite Dosis**, ohne vorher mit Ihrem Arzt zu sprechen. Stecken Sie die Schutzkappe **nicht** wieder auf die Nadelabdeckung.

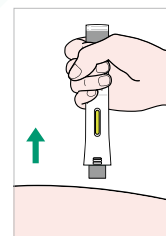

8. Ziehen Sie den Fertigpen nach Abschluss der Injektion gerade nach oben von der Haut weg.

Falls Sie etwas Blut sehen, drücken Sie ein Stück Watte oder Gaze behutsam auf die Injektionsstelle.

Reiben Sie nach der Injektion **nicht** über die Hautstelle.



9. Entsorgung

Entsorgen Sie den Fertigpen (mitsamt der Nadel im Inneren) und die Schutzkappen direkt nach der Anwendung in einem durchstichsicheren Behältnis.

Entsorgen Sie die Fertigpens (mitsamt der Nadel im Inneren) und die Schutzkappen **nicht** im Haushaltsabfall.

Stecken Sie die Schutzkappe **nicht** wieder auf die Nadelabdeckung.

Hinweis:


Diese Anwendungskarte ist nur als Gedächtnisstütze zu verwenden, wenn Ihnen die zusätzlichen wichtigen Hinweise aus der **Packungsbeilage** bekannt sind.

Die Gebrauchsinformation liegt jeder DUPIXENT®-Packung bei. Außerdem finden Sie sie online unter: www.mein.sanofi.de/produkte/Dupixent oder unter <https://www.gebrauchsinformation4-0.de/#>


Weitere Informationen

 Bewahren Sie den/die Fertigpen(s) **für Kinder unzugänglich** auf.

 Bewahren Sie nicht verwendete Fertigpens in der Originalverpackung im **Kühlschrank bei Temperaturen zwischen 2° C und 8° C auf**. Frieren Sie den Fertigpen **nicht** ein.

 **Bewahren Sie DUPIXENT® nicht** länger als 14 Tage bei Raumtemperatur (<25° C) auf. Wenn Sie den Karton dauerhaft aus dem Kühlschrank entnehmen müssen, notieren Sie das Datum der Entnahme in dem dafür vorgesehenen Bereich auf dem Umkarton und verbrauchen Sie DUPIXENT® innerhalb von 14 Tagen.


 Schütteln Sie den Fertigpen **niemals**.

 Erhitzen Sie den Fertigpen **nicht**. Sie dürfen den Fertigpen nicht in der Mikrowelle, mit warmem Wasser oder durch direkte Sonneneinstrahlung aufwärmen.

 Setzen Sie den Fertigpen **nicht** direkter Sonneneinstrahlung aus.

 **Verwenden Sie den Fertigpen nicht** nach Ablauf des Verfalldatums.

 **Verwenden Sie den Fertigpen nicht**, wenn er beschädigt oder auf eine harte Oberfläche gefallen ist.

 **Verwenden Sie den Fertigpen nicht**, wenn die Flüssigkeit trüb oder verfärbt ist oder Ausflockungen oder Teilchen (Partikel) enthält.

 **Verwenden Sie den Fertigpen nicht**, wenn die Schutzkappe fehlt oder nicht ordnungsgemäß aufgesteckt ist.

 **Den Fertigpen nicht wiederverwenden!**

Wichtig:

Ändern Sie niemals selbstständig Ihre Medikation. Sprechen Sie immer mit Ihrem Arzt, ob Sie die verordneten Medikamente seltener oder auch gar nicht mehr benötigen.

Bei Fragen zu DUPIXENT® und der Anwendung steht Ihnen auch unser **Service-Team** zur Verfügung.

Die **Kontaktinformationen** finden Sie auf der Karte im Deckel Ihres DUPIXENT®-Starterkits.